



MagLamp4Vision

Instructions for use


Dansk på mod-satte side

Unpacking and installation

Note: The arm in your MagLamp4Vision contains quite strong springs: When unpacking it, be sure to grab it firmly with both hands to avoid damage or injury.

Mount the table clamp onto the edge of a table, making sure to tighten the clamp's screw firmly. Then set the lamp into the hole atop the clamp.


Plug the wall adapter into a vacant mains outlet, and be sure to turn on the outlet switch: Now your MagLamp4Vision is ready for use.

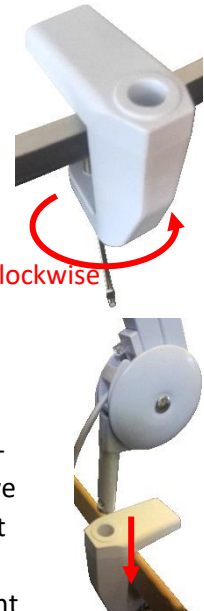

Counter-clockwise to tighten


On/off and dimming

Your MagLamp4Vision is controlled using the button above the lamp's lens: By pressing it one or more times, you can choose between four different light intensities, and "off" as illustrated at

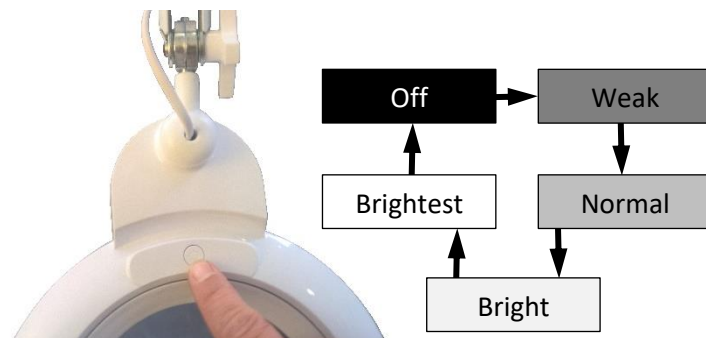

left.

Changing the Lens

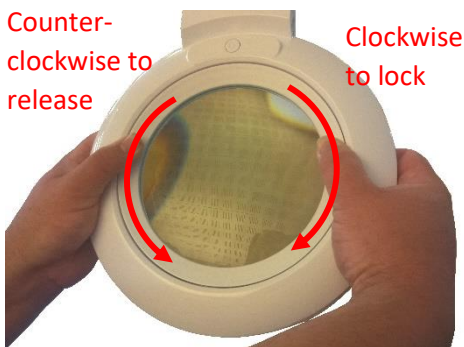

to turn the lens rim clockwise, until it locks in place.

Your MagLamp4Vision ships with two lenses; 3×/8D and 5×/12D. To detach the lens, grab the lamp head with both hands, then use your thumbs to turn the rim of the lens counter-clockwise. Push the lens up from underneath the lamp head.

Note: When freed from the weight of the lens, the lamp head will tend to swing upwards.

Insert the new lens, and rotate it until it "drops into place". Use your thumbs as described above



Cloth pouch

The included cloth pouch must be fitted onto the lamp head, when the lamp is not in use: **This prevents sunshine from reaching the lens, getting focused onto e.g. paper and starting a fire!**





MagLamp4Vision

Brugsvejledning

In English on
opposite side


Udpakning og ibrugtagning

Bemærk: Armen i Deres MagLamp4Vision indeholder særdeles stærke fjedre. Når De pakker den ud, bør De holde godt fast i den med begge hænder for at undgå skader på personer eller omgivelser.


Fastgør først den medfølgende bordklemme til kanten af et stabilt bord – sørg for at stramme skruen i klemmen forsvarligt. Sæt derefter studsens i lampearmens fri ende i hullet øverst på bordklemmen.

Sæt dernæst den påmonterede adapter i en ledig stikkontakt og tænd for kontakten: Herefter er Deres MagLamp4Vision klar til brug.

Mod uret
for at
stramme

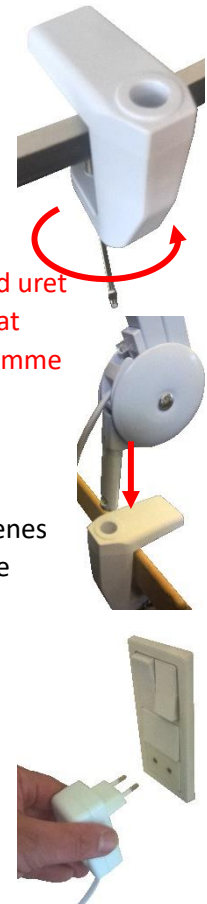


samt slukket.

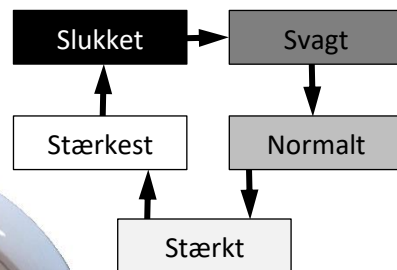

Tænd/sluk og dæmpning

Deres MagLamp4Vision betjenes med den knap, der sidder lige over linsen: Ved at trykke en eller flere gange på denne knap, kan De vælge mellem lys i fire forskellige styrker

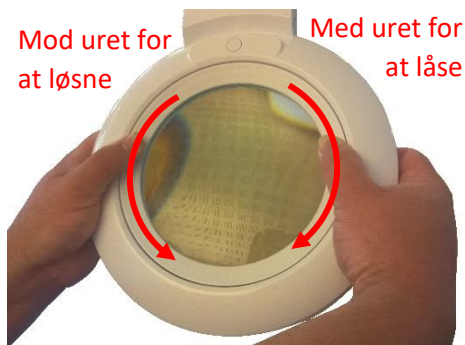

Skift af linse

Deres MagLamp4Vision leveres med to linser; 3×/8D og 5×/12D. For at løsne linsen i lampehovedet, skal De gribe om det med begge hænder, og bruge tommelfingrene til at dreje kanten af linsen mod uret.

Bemærk: Når lampehovedet befries for vægten af linsen, vil det have en tendens til at svinge opad.

Sæt den anden linse i, og drej den indtil den "falder i hak". Brug derefter tommelfingrene som beskrevet ovenfor til at dreje linsen med uret, til den låser fast.

Stofpose

Den medfølgende stofpose skal trækkes over lampehovedet som vist til højre, når lampen ikke er i brug: **Hvis solskin udefra rammer linsen, forhindrer stofposen at linsen fokuserer lyset på f.eks. papir, og derigennem starter en brand.**

