



Brugsvejledning til **Justerbar standlup med LED-lys**



Lys og lup ApS · Erhvervsvej 30 · 2610 Rødovre · Tlf. 43 451 451 ·

Generel brug

Stil Deres standlup oven på det læsestof, billeder etc. De ønsker at se på. Hold om den sorte del af luppen med den ene hånd, mens De bruger den anden hånd til at dreje på den sølvblanke krans øverst på luppen.

- Når De drejer den sølvblanke krans **mod** uret, bliver det De ser gennem luppen **større**.
- Når De drejer den sølvblanke krans **med** uret, bliver det De ser gennem luppen **mindre**.

Afhængig af indstillingen af den sølvblanke krans giver luppen en forstørrelse fra 5 til 6½ gange.

Lyset tændes automatisk, når kransen drejes mod uret (og forstørrelsen øges). For at slukke lyset, skal De dreje kransen så langt **med** uret som den kan.

Drej den sølvblanke krans...

mod uret for at forøge forstørrelsen

med uret for at forøge forstørrelsen




Drej kransen så langt **med** uret som den kan gå, for at slukke lyset i luppen



Til- og fravælge det indbyggede lys

Hvis De benytter luppen et sted hvor der i forvejen er rigeligt lys til at se ved, kan luppens indbyggede lys slås fra, selv om De drejer kransen mod uret for at opnå kraftigere forstørrelse: dette bidrager til at spare på batterierne i luppen.

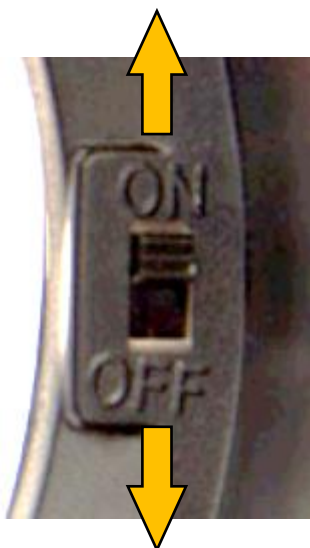

Vend luppen så den sølvfarvede krans vender **væk** fra Dem selv: På undersiden finder De batterirummet, tre miniature-LED-lamper, samt en kontakt – se illustrationen til højre.

Når De holder luppen sådan at batterirummet ses nederst, kan De finde en kontakt ude mod højre: Skubbes denne kontakt nedad (mod "OFF"), forbliver det indbyggede lys slukket, uanset hvordan De indstiller luppen ved at dreje på den sølvfarvede krans.

Skubbes kontakten opad (mod "ON"), er luppen indstillet til at tænde det indbyggede lys automatisk, når De drejer den sølvfarvede krans mod uret.

Batteriskift

Når det indbyggede lys ikke længere tændes (selv om lyset er valgt til som beskrevet ovenfor), skal batterierne skiftes. Luppen bruger to batterier af typen CR2016L.



For at åbne batterirummet, skal De trykke tommelfingeren mod rillerne på batterirummets låg, og trække det et par millimeter mod Dem selv – se illustrationen til højre. Slip dernæst låget, som nu vipper op af sig selv.



Bemærk at de to batterier ligger oven på hinanden, med den flade side opad, og den lidt afrundede side nedad – det er vigtigt at de nye batterier isættes på samme måde.

Tag de brugte batterier ud, og læg to nye batterier oven på hinanden. Vær sikker på at den flade side på begge batterier vender opad.

Sæt de nye batterier ind i batterirummet, og vip låget ned over batterierne. Tryk tommelfingeren mod rillerne på oversiden af batterirummets låg, og skub det fremad – der høres et svagt ”klik” når det sidder som det skal.